

Portpunktion **nicht so,** *Puncture not this way,*



Standardkanüle
Standard needle



Huberkanüle
Huber needle



Beispiel einer Portkanüle
Example of port needle



SFN®-Portkanüle
SFN®-Port needle


sondern so
but this way!

Spezialkanüle mit Trokarschliff und Sicherheitssystem
für implantierbare Port- und Medikamenten-Pumpensysteme.
*Special needle with unique bevel and safety system
for use in implantable port and pharmaceutical pump-systems.*

- garantiert ein stanzfreies Einstechen in die Silikonmembran
guaranteed no punch defects when inserted into silicone membrane
- verhindert so Undichtigkeit und Ausschwemmung von Haut- oder Silikonpartikeln ins Blut mit nachfolgenden Komplikationen
thus preventing leakage and distribution of skin and silicone particles into the bloodstream which may cause complications
- reduziert das Infektionsrisiko/*reduces infection rate*

SFN®-Portkanüle mit
Stanzfreie Nadel
non coring needle *Port needle with*

**DUAL
SAFETY**

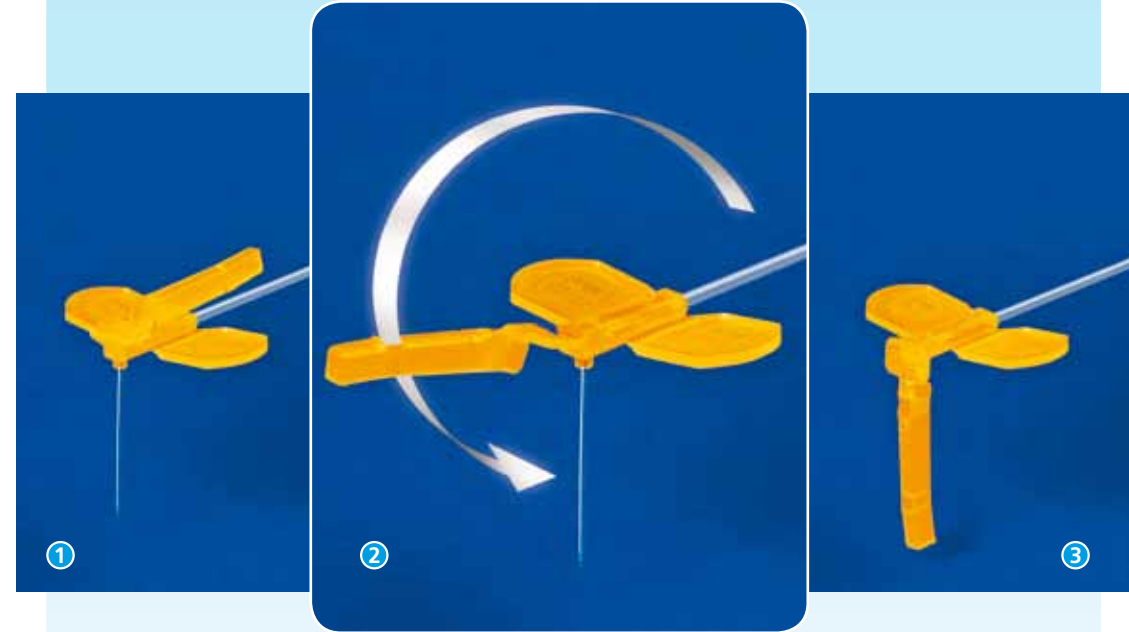

Einfach sicher nach dem „Klick“
Simply safe after „click“

- Schutz vor Nadelstichverletzungen (erfüllt TRBA 250)
protection of needle stick injury (meets requirements of TRBA 250)
- einfaches Umklappen der Schutzkappe bis zum Einklicken
simple downward turn of safety clip until it clicks

...doppelte Sicherheit für alle.
...optimizes safety for all.



SFN® – Portkanüle **SFN® – Port needle**
Stanzfreie Nadel non coring needle

DUAL SAFETY

Art.-Nr. Art.-No.	Ø/mm	Länge/mm Length/mm	Gauge	Extras	PZN	VE Unit
SFN 0720 S	0.7	20	22		7781615	25
SFN 0916 S	0.9	16	20		7781590	25
SFN 0920 S	0.9	20	20		6910275	25
SFN 0920 DW	0.9	20	20	mit Dreiweghahn 3-way check valve	3808398	25
SFN 0925 S	0.9	25	20		7746286	25
SFN 0930 S	0.9	30	20		7746300	25
SFN 1120 S	1.1	20	19		7781621	25
SFN 1125 S	1.1	25	19		7781609	25
SFN 1320 S	1.3	20	18	Speziell zur Blutentnahme, Transfusion, Kontrastmittel-injektion* , Apherese und Hochdruckinjektion specially designed for blooddrawing, transfusion, radioopaque material* , high pressure injection and apheresis	7746257	25

*geeignet für Hochdruckinjektionen 300 psi/21 bar bis 5,2 ml/sek.
 appropriate to high pressure injection 300 psi/21 bar to 5,2 ml/sec.

www.sfn-portkanuelen.de
www.portneedles.de

PakuMed[®]
 medical products gmbh

Im Löwental 79 · 45239 Essen | Germany
 Tel.: +49 201-43 70 97-0 · Fax: +49 201-43 70 97-29
 E-Mail: info@pakumed.de · Internet: www.pakumed.de

SFN® - Portkanüle
 Stanzfreie Nadel
 non coring needle
Port needle



Stanzfrei + klick → **sicher!**
 noncoring + click → **safe!**



- **stanzfrei durch Spezialschliff**
no punch defects with special bevel at the tip
- **stabile Trokarspitze**
stable needle tip
- **Sicherheitsschutz**
safety system
- **doppelt sicher**
dual safety

